



LORMA



AUTOCLAVE LORMA ELECTRÓNICO DIGITAL

AV28L

Beracah
MEDICA

LO MEJOR PARA UNA COMPLETA Y FÁCIL ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

Con un diseño único, fabricado con la más alta calidad para garantizar su efectividad y la seguridad de los pacientes.



Pantalla LCD

Brinda mayor control para monitorear los ciclos de esterilización.

Se observa: tiempo, temperatura, presión, estado de trabajo del equipo y **5 programas de esterilización***.

2 Años de Garantía

Nuestros usuarios son nuestra prioridad, contamos con el servicio técnico más eficiente del mercado.



*5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN

PROGRAMA	1	2	3	4	5
GRADOS (C°)	134°	134°	121°	121°	121°
TIEMPO (MINUTOS)	7	15	15	20	30
PRESIÓN (KG/CM²)	1.8-2.5	1.8-2.5	1-1.9	1-1.9	1-1.9
SECADO (30 MIN)	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
MATERIALES	SIN EMPAQUETAR	EMPAQUETADOS	SIN EMPAQUETAR SENSIBLES A LA TEMPERATURA	EMPAQUETADOS SENSIBLES A LA TEMPERATURA	PROGRAMA EXHAUSTO O LENTO (LÍQUIDOS)

DATOS

Agua: Destilada

Temperatura máx.: 145°C.

Sensor de presión: 0-7 Kg/cm2

Válvula de Seguridad: 3.5 Kg/cm2

Vaso dosificador: 250 ml.

Sellado puerta:

Silicón grado higiénico.

Manguera: 1/4"

Mango para charolas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Equipo

Ancho: 40 cm.

Alto: 42 cm.

Largo: 73 cm.

Dimensiones Cámara

Profundidad: 45 cm.

Diámetro: 28 cm.

Dimensiones Charolas

Charola 1: 44x23.4 cm

Charola 2: 44x27.2 cm


Charola 3: 44x22.8 cm

Eléctrico

Alimentación: 120V~ / 60Hz.

Potencia: 1100 W.

Fusible: 10A Europeo

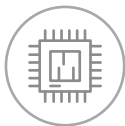

Sistema operado por un microcontrolador

Control absoluto en el sistema de operación y ciclos de esterilización sin ningún error.



LED indicador

Ayuda a un mejor manejo dando seguridad y confianza al esterilizar su material.



ALTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

Fabricado y Diseñado por LORMA®

